

Soluciones para cultivos celulares

Todas las soluciones para cultivos celulares

Reactivos y medios de cultivo

01 · Medios de Cultivo para MSC	3
02 · Agua ultrapura	3
03 · Desinfectantes	3

Consumibles para cultivos

04 · Placas multipocillo	5
05 · Frascos para cultivo	5
06 · Placas para cultivo	5
07 · Tubos de centrifuga	5
08 · Microtubos	6
09 · Filtros celulares	6
10 · Pipetas serológicas	6
11 · Puntas pipeta con filtro	7
12 · Cámara recuento celular	8

Equipamiento

13 · Cabinas de flujo laminar y seguridad biológica	9
14 · Cabinas para cultivos en hipoxia	9
15 · Incubadores de CO ₂	10
16 · Centrifugas	10
17 · Contador celular automático	11
18 · Microscopio Celloger	12
19 · Equipamiento de frío	13
20 · Agitadores y rollers	16
21 · Aspirador de medios	16
22 · Autoclaves	17
23 · Baños y estufas	17
24 · Medidor de pH	18
25 · Equipos de desinfección de salas y equipos	18
26 · Pipetas y pipeteadores	19

Reactivos y medios de cultivos

Medios de cultivo para MSC

Medio de Cultivo definido como libre de suero (CellCor SFD MSC) o Medio de Cultivo químicamente definido (CellCor CD MSC) para cultivos de células madre mesenquimales.

	OCellCor™ SFD MSC	CellCor™ CD MSC
Clase	Sin suero Totalmente definido	Sin suero Definido químicamente
Tipo de célula	Célula madre mesenquimatosa humana	
Aplicaciones	Cultivo celular / expansión	
	Ideal para expansión masiva	Ideal para procesos de precisión
Grado	RUO GMP Clínico	
Volumen	500 mL	
Almacenamiento	Duración de 12 meses a -20 C°	



Agua ultrapura

El agua ultrapura, libre de DNAsas / RNAsas, es un agua de grado de biología molecular extremadamente pura adecuada para las aplicaciones de biología molecular más comunes.

Código	Descripción	Presentación
DG0008	AgaPure™ Agarose LE, Low EEO (Molecular Biology Grade)	500 g



Desinfectantes

Desinfectantes de superficies, de material y de equipamiento de laboratorios. Tres variedades disponibles: Solución GERMfree para desinfección de instrumentos y superficies en general. Solución MYCOPLASMA para desinfección particularmente activa de micoplasma y gran variedad de microorganismos. Solución ZERO DNA para limpieza de partículas contaminantes de ADN y ARN en muestras y ensayos de PCR.

Código	Descripción	Presentación
DSNF-GFS-750	Solución GERMfree en pulverizador	750 ml
DSNF-GFR-750	Recambio GERMfree	750 ml
DSNF-MYS-250	Solución MYCOPLASMA en pulverizador	250 ml
DSNF-MYR-500	Recambio MYCOPLASMA	500 ml
DSNF-ZDS-250	Solución ZERO DNA en pulverizador	250 ml
DSNF-ZDR-500	Recambio ZERO DNA	500 ml



Consumibles para cultivos

Placas de cultivo multipocillo

Las placas de cultivo celular y tisular son ideales para el crecimiento celular y un óptimo rendimiento en diversos tipos de ensayos. Los pocillos están marcados con código alfanumérico para una fácil identificación. Apto para todos los instrumentos de uso habitual y automatización. Incluye tapa. Envase unitario.

Esterilizado por radiación. No pirogénico. Libre de DNasa y RNasa.

Código	Descripción	nº pocillos	Área trabajo
D200001	Superficie tratada	6	9,6 cm ²
D200002	Superficie tratada	12	3,85 cm ²
D200003	Superficie tratada	24	1,93 cm ²
D200004	Superficie tratada	48	0,83 cm ²
D200005	Superficie tratada	96	0,33 cm ²



Frascos para cultivo

Los frascos de cultivo celular y tisular son perfectos para el crecimiento celular con un óptimo rendimiento en casos de volúmenes de muestra inicial pequeños y medianos. Disponible en superficie tratada y no tratada. La superficie del frasco es plana y libre de estrías para maximizar el área de crecimiento utilizable. El innovador diseño de cuello en ángulo ofrece un buen acceso para la pipeta y el raspador. Ambos lados del matraz tienen graduación grabada.

Esterilizado por radiación. No pirogénico. Libre de DNasa y RNasa.

Código con ventilación	Descripción	Volumen max.	Área trabajo
D200020	Sin tratar	25	12,5 cm ²
D200021	Sin tratar	50	25 cm ²
D200022	Tratado	25	12,5 cm ²
D200023	Tratado	50	25 cm ²
D200024	Tratado	250	75 cm ²
D200025	Tratado	600	182 cm ²

Código sin ventilación	Descripción	Volumen max.	Área trabajo
D200010	Sin tratar	25	12,5 cm ²
D200011	Sin tratar	50	25 cm ²
D200012	Tratado	25	12,5 cm ²
D200013	Tratado	50	25 cm ²
D200014	Tratado	250	75 cm ²
D200015	Tratado	600	182 cm ²



Placas para cultivo

Las placas de cultivo de células y tejidos son recipientes ideales para el crecimiento celular y proporcionan un óptimo rendimiento en muestras con volúmenes iniciales pequeños o medianos y también son útiles en la separación de muestras, el pretratamiento, el almacenamiento, etc.

Disponible en superficie tratada. El grosor uniforme de la pared del fondo plano garantiza un fondo sin distorsiones.

Esterilizado por radiación. No pirogénico. Libre de DNasa y RNasa.



Código	Descripción	Área de crecimiento celular
D200035	32,8 mm	8,5 cm ²
D200060	52 mm	21,2 cm ²
D200100	87,8 mm	60,8 cm ²
D200150	135,5 mm	143 cm ²



Tubos de centrifuga

Tubos fabricados en polipropileno, ideales para aplicaciones clínicas y de investigación. Material libre de DNasa, RNasa y pirógenos. También libre de caucho y metales pesados. Alta transparencia del material para una visualización clara durante los experimentos, especialmente para biología molecular.

Tubo y tapón diseñados con el sistema de rosca plana para una estanqueidad total.



Código	Descripción	Presentación	Estéril
429940	tubo sin faldón 15 ml	Tubos sueltos en bolsa de 500 ud.	no
429945	tubo sin faldón 15 ml	20 bolsas 25 ud.	no
429942	tubo sin faldón 15 ml	20 bolsas 25 ud.	ESTÉRIL R
429930	tubo sin faldón 50 ml	20 bolsas 25 ud.	no
429931	tubo sin faldón 50 ml	20 bolsas 25 ud.	ESTÉRIL R
429950	tubo con faldón 50 ml	20 bolsas 25 ud.	no
429951	tubo con faldón 50 ml	20 bolsas 25 ud.	ESTÉRIL R



Microtubos de 1,5 ml

Fabricados en polipropileno ultra claro autoclavable. De fácil manipulación con una sola mano. Ideal para el almacenaje y congelación de células, espermatozoides, bacterias o cualquier otra muestra biológica. Graduado cada 100 µl. Banda mate para escritura.

Resiste entre -90 °C y 121 °C.

Resistencia a la centrifugación: 20.000 xg.

Libre de RNasa, DNasa, DNA e inhibidores de PCR.

Disponible versión en paredes de baja adhesión.



Código	Descripción	Presentación
4092.3N	color natural	10x500
4092.3NS	color natural, superficie de baja adhesión	10x250



Filtros celulares

Dispositivos estériles, rápidos y fáciles de usar para aislar células primarias para obtener consistentemente una suspensión uniforme de células individuales de los tejidos. Envasado individualmente.

Esterilizado por radiación. No pirogénico. Libre de DNasa y RNasa



Código	Capacidad	Color	Estéril
D200031	40 µm	Azul	STERILE R
D200032	70 µm	Natural	STERILE R
D200033	100 µm	Amarillo	STERILE R




Pipetas serológicas

Fabricadas en poliestireno cristal. De un solo uso y esterilizadas por radiación.

Garantizan una máxima precisión sin retención de líquido a nivel de la soldadura

Volúmenes desde 1 ml a 50 ml, identificados con una poliolefina (no contiene fibras sintéticas) algodón blanco y serigrafiado en color según volumen. Libres de DNasa y RNasa.

Código	Descripción	Presentación	Capacidad
900030.C	Punta A	Peel-pack de 1	1 ml
900031.C	Punta A	Bolsa de 25	1 ml
900130.C	Punta C	Peel-pack de 1	1 ml
900032.C	Punta A	Peel-pack de 1	2 ml
900033.C	Punta A	Bolsa de 25	2 ml
900034.C	Punta A	Peel-pack de 1	5 ml
900038.C	Punta A	Bolsa de 25	5 ml
900144.C	Punta B	Peel-pack de 1	10 ml
900036.C	Punta A	Peel-pack de 1	10 ml
900037.C	Punta A	Bolsa de 25	10 ml
900136.C	Punta C	Peel-pack de 1	10 ml
900146.C	Punta B	Peel-pack de 1	10 ml
900041.C	Punta A	Peel-pack de 1	25 ml
900043.C	Punta A	Peel-pack de 1	50 ml

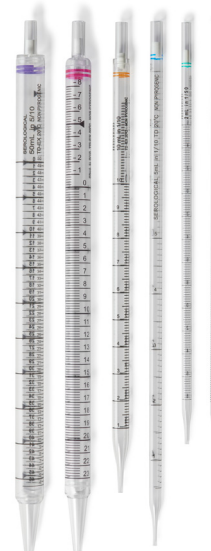

Puntas de pipeta con filtro

El filtro evita la formación de aerosoles y previene posibles contaminaciones de la pipeta y/o de la muestra. Purifica de aerosoles y contaminantes el aire que entra en contacto con la pipeta, absorbe parcialmente la muestra en caso de sobreaspiración (10-20%), protege la muestra de una pipeta accidentalmente no estéril y contiene filtro de porex. El complemento perfecto para un pipetado **seguro, ágil, cómodo y preciso**.

Características:


- Baja retención
- Resistentes a autoclave
- Buen anclaje
- Alta transparencia
- Puntas homogéneas
- Libres de metales
- Trazabilidad

Nuestras puntas de fabricación propia son compatibles con la mayoría de las pipetas disponibles en el mercado. Para cada modelo, en el presente catálogo, especificamos su compatibilidad con las principales marcas de pipetas. No obstante, es importante tener en cuenta que los conos de pipeta de una misma marca pueden variar según el modelo o el año de fabricación. Recomendamos a los usuarios que consulten con nuestro departamento comercial o soliciten muestras antes de utilizar las puntas con nuevos modelos de pipetas.

Tipos de presentación



Rack para puntas macro

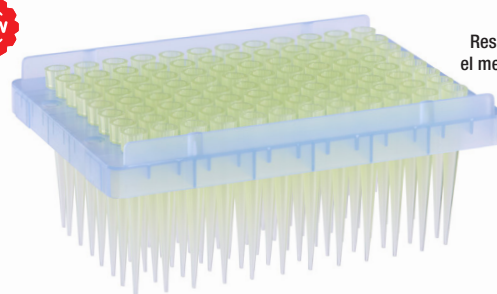

Respetuoso con
el medio ambiente

Refill para racks reutilizables



Rack para puntas



Rack para puntas largas

Cámara de recuento celular

Cámara de recuento de plástico desechable de alta precisión, diseñada para resolver los inconvenientes de la cámara de recuento de vidrio convencional.

- Reduce el riesgo de exposición del usuario a muestras infecciosas o peligrosas
- Aumenta la eficiencia al eliminar la necesidad de lavar o esterilizar en autoclave los componentes
- Construcción ligera y robusta y resistente a arañazos o grietas en la superficie
- Resultados fiables y reproducibles
- Patrón de cuadrícula impreso y superficie tratada.

Aplicaciones:

- Recuento de células (eritrocitos, leucocitos, células de mamíferos, etc.)
- Viabilidad celular
- Medición de la concentración celular

Especificaciones:

- Consta de cuatro canales cerrados
- Paquete de 50 portaobjetos individuales
- Dimensión: 25 mm (W) x 75 mm (L) x 2 mm (T)
- Profundidad del canal: 100 μ m
- Volumen del canal: 20 μ L



Equipamiento

Cabinas de flujo laminar y seguridad biológica

Nirco, como referente en cabinas de seguridad biológica cuenta con varias gamas de producto (desde básicas a premium) para adaptarse a la perfección a sus necesidades técnicas y presupuesto. Disponibles también modelos ultracompactos para limitaciones de espacio o extragrandes y reforzados. Además, nuestros equipos permiten personalizaciones.

Cabinas Nuaire

Las cabinas de bioseguridad clase II Nuaire de reconocida calidad, fiabilidad y ergonomía. Dispone de modelos certificados EN12469 y NFS49, de Clase II A2, B1 y B2.

Características generales:

- Garantía del fabricante: 6 años en piezas y filtros HEPA.
- Fabricación monolítica en acero inoxidable
- Sistema de Control Electronico FlowGard®
- Plenum flexible (Sistema HEPEX patentado) para mayor vida útil de los filtros HEPA (99,995%) y garantía de verdadero flujo laminar
- Bandeja de trabajo con sistema de retención de derrames y válvula de drenaje
- Cabina ergonómica para evitar la fatiga del operador con un frontal con 10° de pendiente, reposabrazos, bandeja de trabajo rebajada respecto el reposabrazos, altura de la base regulable (manual o motorizada).



Cabinas para cultivos en hipoxia (DWS)

Las cabinas de hipoxia Don Whitley crean condiciones hipóxicas y anóxicas en un entorno de estación de trabajo controlado y sostenido. Es ideal para investigadores de cultivos de células y tejidos que desean controlar con precisión el oxígeno, el dióxido de carbono, la temperatura y la humedad. Las aplicaciones de este instrumento incluyen la investigación del cáncer, la neurología y la investigación cardiovascular, así como muchos otros tipos de trabajos de cultivo celular.



Incubadores de CO2

La nueva serie de incubadores de CO2 InVtroCell de NuAire proporcionan un entorno “in vitro” controlado y fiable para el crecimiento óptimo del cultivo de células. Los 3 años de garantía en piezas original del fabricante avalan la calidad y fiabilidad de los equipos. Características:

- Sensor de CO2 IR, para una precisión de $\pm 0,1\%$ en el rango de 0,1-20% CO2. Tiempo de recuperación: 5 minutos
- Modelos de 160L o 200L con opción de calor directo o camisa de agua. Disponibles con ciclos de esterilización secos y húmedos y sistemas de control de humedad relativa y O2.
- Las condiciones el interior son de clase ISO 5 y con ligera presión positiva.
- La cámara queda totalmente diáfana para su limpieza.
- Controlador táctil con completa información del estado del equipo, histórico y alarmas.
- Conexiones: USB, salida 4-20mA y contacto para alarma remota.
- Posibilidad de personalizaciones (varias puertas internas, interior de cobre, apertura a izquierdas...)



Centrífugas

Centrífugas, tanto en versión ventilada como refrigerada, para los procesos habituales de centrifugación de muestras en un laboratorio de cultivos celulares.

La gama de centrífugas compactas se puede utilizar con tubos de 50, tubos de 15ml, etc. Las microcentrífugas son compatibles con tubos eppendorf y tubos de PCR. También existe una amplia gama de centrífugas universales que se pueden configurar con distintos rotores para centrifugar todo tipo de tubos, formatos, y tamaños, desde eppendorf hasta microplacas pasando por tubos cónicos de 250ml.



Contador automático de células

El Facscope B es un sistema automático de conteo celular basado en campo claro x4 totalmente independiente que permitirá dirigir tus esfuerzos a tareas más creativas y analíticas. Características:

Características	
Dimensiones	163 x 293 x 216 mm
Peso	5 Kg
Objetivo de la lente	4X
Fuente de luz	4W Led verde
Cámara	5MP CMOS
Rango de concentración celular óptimo	1 x 10 ⁴ ~ 1 x 10 ⁷ cells/mL
Diámetro celular detectable	5 ~ 60µm

Precisión

Permite analizar volúmenes de conteo superiores a cualquier otro sistema de conteo proporcionando valores más precisos.

Autoenfoco




En base al grid de la cámara autoenfoca manteniendo siempre el plano constante.

Algoritmo optimizado

Es capaz de ofrecer conteos precisos a pesar de formas celulares irregulares, agregados y diferenciación células viables y no viables.

Facilidad de uso

Pantalla táctil de fácil manejo, parámetros predefinidos con opción de modificaciones, exportación de resultados por USB, emisión de informes de conteo

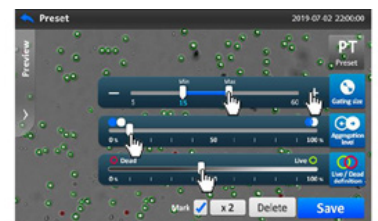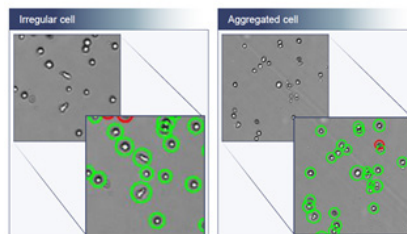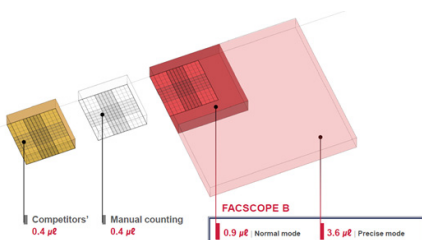


Más información

Microscopio Celloger Mini


Celloger Mini es un sistema automático de obtención de imágenes de células vivas basado en una técnica de microscopía de campo claro. Cuenta con autoenfoco preciso, aunque también, además del X e Y sobre el pocillo se puede controlar manualmente la Z, objetivo 4 X y el sensor de captación de imágenes CMOS. Es compatible con placas y multiplacas de hasta 96 pocillos. Su construcción permite el uso en el interior de un incubador de CO₂ por lo que puede llevar a cabo automáticamente y sin modificar las condiciones de cultivo aplicaciones como:

- Curva de crecimiento y confluencia
- Migración celular
- Ensayos de cicatrización de herida
- Proliferación y diferenciación

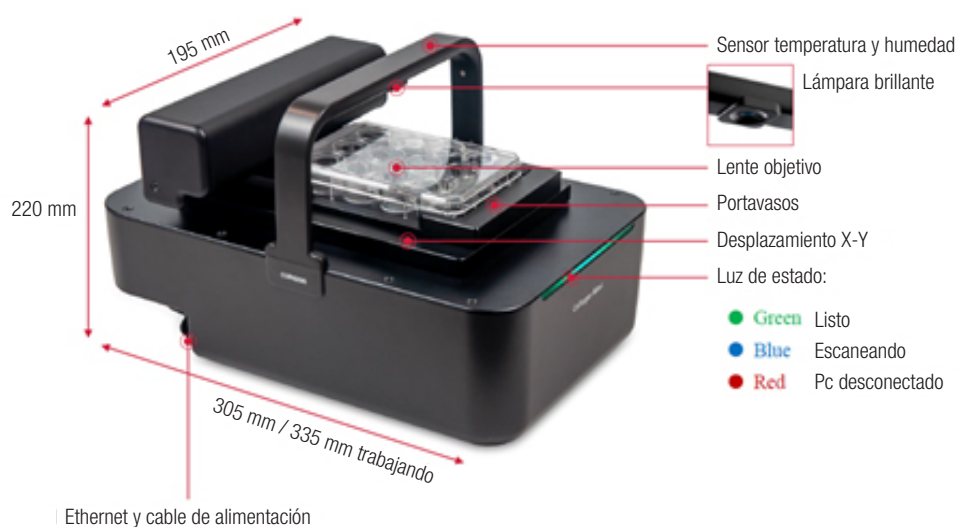

Software

El software permite el análisis de las imágenes capturadas (videos time-lapse, gráficos de crecimiento, mediciones...) y la exportación en TIFF, JPEG, PNG, AVI

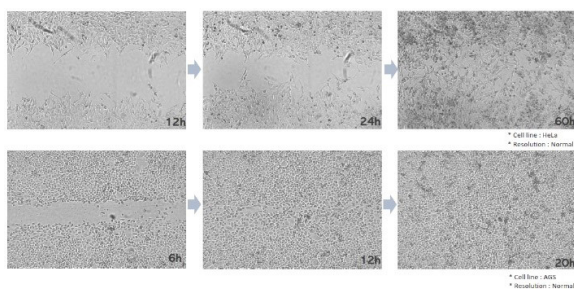

Diseño compacto y cero instalación

Comparación del microscopio Celloger Mini con otros equipos similares.



Más información



*También disponible su versión Nano que además incluye fluorescencia para GFP or RFP.

Equipamiento de frío

Extensa gama de productos en neveras, combis, congeladores, ultragongeladores y tanques de N₂. Disponibles en diferentes tamaños, configuraciones y distintas certificaciones (marcados CE, Medical Device, DIN 58345...). Sea cual sea tu necesidad, en Nirco S.L. tenemos una solución para ti.

Ultracongelación

La serie BLIZZARD de NUAIRE se compone de equipos de alta gama, tecnología clásica, **muy robustos y fiables** con capacidades desde **333l hasta 828L**.

Los ultracongeladores NUAIRE de -86°C son equipos de reconocida fiabilidad y durabilidad con alta capacidad de almacenamiento de muestras. Con una única puerta externa y 4 puertas internas verdaderas para cada compartimento, con cierre a presión y junta aislante, aíslan la cámara interna y minimizan la formación de hielo, a la vez que optimizan el almacenamiento interno.

Ultracongeladores Haier Biomedical

- Ultracongeladores -40 a -86°C con capacidades de 529L, 729L o 829L.
- 4 puertas internas con cierre por maneta y burlete.
- Pantalla táctil.
- Compresores Smart Frequency.
- MÁXIMA SEGURIDAD: DUAL COOL TECHNOLOGY, en caso de fallo en uno de los compresores el otro es capaz de mantener la Tª a -86°C.
- Tendrás 2 equipos en uno, ahorrando en sistemas back up.



Ultracongelador horizontal Cryofreezer -150 °C

- Un buena alternativa a los tanques de LN₂ para un almacenamiento en seco de muestras.
- Tecnología de refrigeración por compresores en cascada y refrigerantes naturales.
- Control y visualización de parámetros por pantalla táctil.
- El sistema es seguro, conveniente y económico.
- Arcón de 209 litros de capacidad.



Neveras, congeladores y combis

Extenso catálogo de equipos de frío en neveras, congeladores, combis para dar respuesta a todas las necesidades que se presenten en un laboratorio de cultivos.

- Disponibles en diversas dimensiones y capacidades
- Diferentes configuraciones internas.
- Contamos con opciones de gamas básicas y profesionales.

2 años de garantía

Equipos en stock

Servicio Técnico propio

Mantenimientos preventivos

Neveras de laboratorio

- Disponibles en diversas capacidades.
- Diferentes configuraciones internas.
- Contamos con opciones para:
- Almacenamiento de fármacos.
- Laboratorio de reactivos (ATEX).
- Laboratorios general e industria.



Congeladores y combis

- Disponibles en diversas capacidades.
- Diferentes configuraciones internas.
- Combis con puerta de cristal.



Referencia	Descripción
HYC-68A	Nevera profesional (2 - 8C) MINI 68L puerta cristal
HYC-118A	Nevera profesional (2 - 8C) bajo poyata 118L puerta cristal
HYC-390 (USB)	Nevera profesional (2 - 8C) vertical puerta cristal 390L USB
HLR-310SF	Nevera LAB ATEX (3 - 16C) vertical 310L puerta solida
HYC-509	Nevera FARMACIA INVERTER (2 - 8C) puerta cristal 509L
HYC-1099	Nevera FARMACIA INVERTER (2 - 8C) doble puerta cristal 1099L

Tanques de nitrógeno líquido

Los contenedores de nitrógeno líquido de Antech consiguen un almacenamiento seguro y eficiente de sus muestras, racks y cajas incluidos. El modelo CryoMaster 6.000 incluye base con ruedas y control digital de la temperatura.


Disponibles también otras capacidades, accesorios y productos relacionados (dewars tipo lechera, tanques de reserva de N2...)

Biobank Series

Almacenan en la bandeja giratoria en áreas abanico, claramente etiquetadas. Cuenta con sistema de seguridad para evitar salpicaduras de LN2 y eliminar en un click el humo frío en las aperturas.

Además, cuentan con el sistema Cryosmart para un control y monitoreo completos. Todos los datos y muestras están protegidos por un sistema de control de acceso seguro.

- Gran capacidad de 13 000 a 94 875 viales de 2 ml.
- Almacenamiento en fase de vapor a -190°C .
- Garantía de vacío de 5 años.

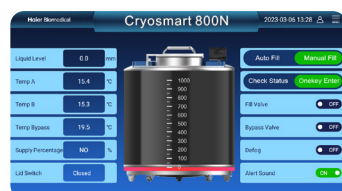

Sistema Cryosmart



Registadores de temperatura para transporte y almacenamiento

Para el registro de los datos de temperatura durante el envío y almacenamiento de muestras, te ofrecemos registradores con descarga manual de datos vía USB, sensores de temperatura sin cables con descarga inalámbrica (por Bluetooth) o automática en software de gestión de datos y alarmas.

Código	Descripción
DS-LOG200	Datalogger con sonda interna de temperatura. Descarga de datos por USB
DS-LOG200E	Para criogenia hasta -200°C , con sonda interna de temperatura. Sonda externa opcional y descarga de datos por USB
DS-6000-0201 (para DS-LO- G200E)	Sonda Pt100 con 3 mm de cable de PTFE. -200°C a 250°C , diámetro 3 mm y longitud de vaina 50 mm
SPY LORA	Sensor registrador T° y otros parámetros en equipos fijos o transporte. Descarga datos vía inalámbrica. Comunicación 848Mhz largo alcance.
SPY NANO	Sensor registrador T° y otros parámetros en equipos fijos o transporte. Descarga datos vía inalámbrica. Comunicación 2.4Ghz corto alcance.
VERIGOPOD	Registrador Bluetooth para temperatura y descarga datos en APP.



SPY NANO

SPY LORA

DS-LOG200

Equipamiento

Agitadores orbitales y angulares

Contamos con un amplio rango de agitadores tanto orbitales como angulares. Se pueden configurar para adaptarlos a todo tipo de formatos de tubos, microplacas, flasks e incluso bolsas.



En caso de tener que realizar una incubación dentro de un incubador, los modelos de agitadores denominados para ambientes extremos están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren CO₂ y humedad para un crecimiento celular óptimo. El control remoto se conecta magnéticamente al exterior de la mayoría de los incubadores o se coloca fácilmente en la mesa de laboratorio. La base del agitador se coloca dentro del incubador y se conecta al controlador táctil con un cable de 170 cm que permite un control externo sencillo de los ajustes de velocidad y tiempo. Este agitador cuenta con un motor con clasificación IP65.




Agitador para entornos extremos con controlador externo

Aspirador de medios

El Whitley AsPROvac es un aspirador de laboratorio todo en uno para garantizar que los desechos líquidos biológicos se puedan aspirar y eliminar de forma rápida y segura. Ya sea que se trate de la delicada eliminación de sobrenadantes o el rápido vaciado de matraces de cultivo más grandes, este sistema flexible tiene 15 niveles de vacío para alterar la velocidad de aspiración (control digital por pantalla).

Aspiración sencilla o de 8 canales. Botella de residuos de 4 litros. Todas las partes que entran en contacto con los desechos líquidos se pueden esterilizar en autoclave.

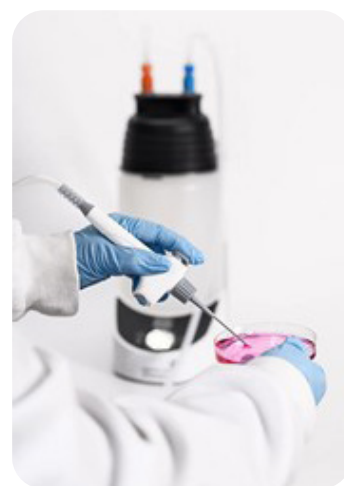

Autoclaves

Autoclaves tanto verticales como de sobremesa, con la opción de incluir reservorio de agua. Existen disponibles un amplio rango de volúmenes y son totalmente configurables para adaptarse a los procesos de cada usuario. Para más información consultar con nuestro departamento comercial.

CATÁLOGO GENERAL DE DELTALAB

Este catálogo muestra solo una selección de nuestra oferta. Visita nuestra web para descubrir nuestro catálogo general, explorar todas nuestras gamas de productos y encontrar la solución que mejor se adapte a tus necesidades.



Ver catálogo completo



HRLM-60/80A



HRLM-110A

Baños Grant JBN

Baños sin agitación robustos y fiables. Marca de referencia del mercado de alta durabilidad (3 años de garantía). Gran rango de volúmenes 5-12-18 y 26 Litros. Tecnología Ajuste y Olvidar™ - rápido calentamiento, control de temperatura fiable. Inicio de secado avanzado y ejecución protección de secado lo que evita servicios de reparación costosos. Válvula drenaje, bandeja y tapa incluida. Display para control digital. Disponibles también modelos básicos de control analógico.



Estufas de esterilización

Esteriliza en lugar de desinfectar. Estufa para esterilización que protege y conserva la vida del instrumental de laboratorio.



Medidor de pH

Dispositivo de medición: pH - redox – temperatura. Con sistema CAL TIMER para programar la calibración automática a 3 puntos, con patrones USA y NIST y 2 puntos. Función GLP: fecha y hora, recuperación de datos de calibración y función caducidad de calibración. Admite electrodos digitales DHS y analógicos. Software GLP DataLink y datalogger con 1000 datos de memoria, manual y automático, con conexión micro-USB para PC.

Disponibles también modelos portátiles.




Sistema de Phileas desinfección de salas y equipos

Autoclaves tanto verticales como de sobremesa, con la opción de incluir reservorio de agua. Existen disponibles un amplio rango de volúmenes y son totalmente configurables para adaptarse a los procesos de cada usuario. Para más información consultar con nuestro departamento comercial.


Modelo	Reservorio	Flujo	Volumen	Característica
Phileas Genius	250 ml	300 ml/h	0,2 - 10 m ³	Batería de 2h 30 min
Phileas 25	500 ml	500 ml/h	3 - 40 m ³	Batería de 2h 30 min
Phileas 75	2 L	1200 ml/h	3 - 40 m ³	Con ruedas y balanza para reservorio
Phileas 250	250 ml	300 ml/h	0,2 - 10 m ³	Con ruedas y balanza para reservorio



Phileas Genius
Una concentración de tecnología

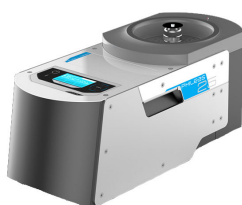

Phileas 25
Robustez sin peso

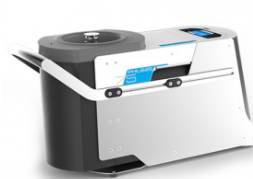

Phileas 75
Movilidad y volumen



Phileas 250
Potencia y precisión

Pipetas Nichiryo (Nichipet EXIII)

Unas de las pipetas más fiables del mercado. Robustas y muy fáciles de usar. Totalmente autoclavable (121C° durante 20 minutos) y con resistencia UV mejorada en 8 tamaños que cubren un rango de volumen grande (0.1µL - 10000µL). Ajuste de volumen digital fácil, eyector de puntas y filtro en volúmenes mayores. Material PTFE (resina de flúor) utilizado en la cámara hermética del instrumento. Émbolos de cerámica usados en volúmenes mayores de 200ul.



Pipetas Nichiryo (Nichipet EXIII Premium NPP)

Innovación en durabilidad, robusted, estabilidad y comodidad en el último modelo de la serie Nichipet con características mejoradas. La serie Premium ha sido probada para dispensación/aspiración 600.000 veces.

La temperatura de la mano no traspasa al cuerpo de la pipeta lo que evita afectar en la medición del volumen

Menor fatiga: botón de empuje más grande, color blanco del cuerpo lo que mitiga el reflejo de la luz.

Con un sistema de soplado acelerado y una dispensación de segunda etapa más larga hace que mejore la eficiencia de dispensación (2µL, 10µL).



Pipetas multicanal (Nichipet EXIII)

El modelo Nichipet EX II multicanal reduce la fatiga del pipeteado ya que reduce el peso hasta un 30%. Material fuerte para resistencia UV y totalmente autoclavable. Cuerpo compacto y duradero con mecanismo de cerrado para ajuste de volumen. Mango rotatorio (360°) para fijar la posición adecuada en el pipeteado.

4 tamaños (V, S, L, K) para un amplio rango de volumen desde 0.5 a 300µL y ajuste digital.



Pipeteador Drummond (XP 4000202)

El modelo Pipet-Aid es ligero, portátil y compacto, diseñado específicamente para minimizar la fatiga del operario. Válida para la mayoría de las pipetas de 1 a 100 mL. Cada aspiración y botón de dispensación tiene 3 velocidades, rápida (hasta 50 mL en 5 segundos), media y lenta. Cuenta con filtro que retendrá el paso del aire en cualquier dirección si se humedece, alertando al usuario de posible contaminación.





Contacta con nosotros para información comercial:

Sede central

Plaza de la Verneda 1,
Pol. Industrial La Llana
08191 Rubí - Barcelona
Tel.: 93 699 50 00

Madrid

Puerto de Navafría 12
28935 Móstoles - Madrid
Tel.: 91 616 42 68

Murcia

Pol. Ind. Los vientos
Calle Neptuno 59A
30565 Las Torres de Cotillas
Murcia
Tel.: 96 862 65 09

Valencia

Parque comercial Albufera
Edificio Albufera - Oficina 801
Plaza Alquería de la Culla, 4
46910 Alfafar - Valencia
Tel.: 96 395 08 09

VISITA NUESTRA WEB



info@deltalabgroup.com

www.deltalabgroup.com